

スパイロフィルタ 999

【禁忌禁止】
・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

スタンダードタイプ(999S)



マウスタイプ(999M)

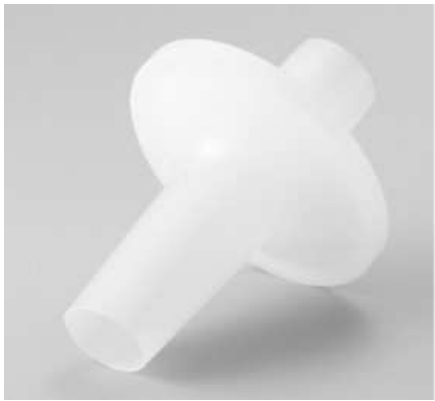

寸法、質量

| タイプ | 寸法(mm) | 質量(g) |
|-----------------|-----------|-------|
| スタンダードタイプ(999S) | 83×φ83 | 24 |
| マウスタイプ(999M) | 111.5×φ83 | 25 |

〔動作原理〕

機器内部に設置されたろ過膜(一層)により、呼出時に吐き出される大きな唾液や喀痰はここでせき止められ、一部微少なものは装置内に入り表面に付着する。吸入時には、装置を通して空気とともにこれらも吸い込む可能性があるが、再度ろ過膜によりろ過される。

【使用目的又は効果】

肺機能検査における唾液、喀痰等の除去に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前

- ・包装を開封し、本品を取り出す。
- ・併用する医療機器のマウスピース接続口に本品を接続する。
- ・スタンダードタイプの場合、本品にマウスピースを接続する。

2. 使用中
 - ・併用する医療機器の検査手順に従う。
3. 使用後
 - ・併用する医療機器より本品を取り外し、廃棄する。(本品は、一人一回限りの使用とすること。)

【使用上の注意】

- ・併用する機器の取扱説明書を必ず参照すること。
- ・フィルタに唾液、喀痰等が多量に付着すると抵抗が上昇し、正しい検査がおこなえないため新しいフィルタに交換すること。
- ・本品は、一人一回限りの使用とすること。使用後はすみやかに廃棄し、洗浄・滅菌したりして再使用しないこと。
- ・使用前に、製品に破損や汚損がないことを確認すること。異常が認められた場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：チェスト株式会社
TEL：03-3813-7200